

# Helpt uw kind!

*MUPPY*® de correctiehulp (MVP) helpt u! Hij maakt het makkelijker om alle schadelijke duimgewoontes af te leren.



Tanden, mond en kaak van uw kind bevinden zich in een gevoelige groeifase. Daarom kan alleen uw tandarts of kaakorthopeed bepalen, met welke *MUPPY*®-grootte uw kind zich goed voelt en welke *MUPPY*®-vorm een eventueel al bestaande anomalie kan corrigeren.

**Merk: MVP-grootte I, melkgebit = rode ring**

# De 6 *MUPPY*®-regels

Ervaringen hebben aangetoond, dat meer dan 90% van de kinderen met behulp van *MUPPY*® de correctiehulp het schadelijke duimen opgeeft. Uw ondersteuning en een paar regels helpen uw kind:

- 1** *MUPPY*® is een vervanging voor spenen en dergelijke. De omwisseling moet vrijwillig en zonder dwang volgen.
- 2** *MUPPY*® moet elke nacht worden gedragen.
- 3** *MUPPY*® moet ook overdag regelmatig en urenlang (tijdens het maken van het huiswerk en tijdens het televisie kijken) in de mond zitten. Dat is belangrijk, want zo schakelt een kind makkelijker over.
- 4** *MUPPY*® leert het duimen in de regel binnen één week af. Helpt u mee om terugvallen in de oude gewoonte te verhinderen: uw kind moet *MUPPY*® 's nachts nog tenminste zes tot acht weken doordragen.
- 5** Indien *MUPPY*® niet in de mond zit, dan hoort hij in de hygiënische opbergdoos te worden bewaard.
- 6** Niet vergeten: tanden én *MUPPY*® regelmatig poetsen!

## Overhandigd door:

Praktijkstempel

© 2003 Dr. Hinz Dental-Vertriebsgesellschaft mbH, Herne, Order no. 93532



**Afgelopen**  
**met de schadelijke**  
**duimgewoonte**

***MUPPY*® de correctiehulp\* voor  
de mooiste kinderlach van  
de hele wereld.**

Patiënteninformatie (melkgebit)  
\* naar Prof. Hinz

**Dr. Hinz**  
Dental  
Dr. Hinz Dental-  
Vertriebsgesellschaft  
A Dr. Hinz Company

## Duimende kinderen zien er weliswaar schattig uit...

Natuurlijk roept duimen of zuigen bij uw knappe dochtertje of uw kleine zoontje een geruststellend gevoel op. Want per slot van rekening is de babytijd nog helemaal niet zo lang voorbij! En "toen" was zuigen verbonden met lichaamswarmte, met een vertrouwde lichaamsgeur, met intensief genoten tederheid en bescherming.

Maar helaas zijn

- ♦ duimen en vingers
  - ♦ kalmeringsspenen
  - ♦ flesjes met spenen
  - ♦ bedhoekjes en ook de
  - ♦ kroeloren van de teddybeer
- vreemde voorwerpen in een mond.


### ...maar de gevolgen zijn ernstig!

Duimvoorwerpen storen de tanden en kaken bij hun normale ontwikkeling. Een speen zorgt daarbij voor een

- ♦ **symmetrisch open beet.**

Door voortdurend op de duimen te duimen ontstaat er meestal een

- ♦ **asymmetrisch open beet.**

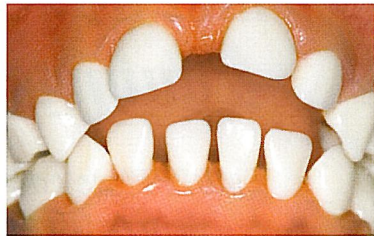

Jarelang duimen veroorzaakt een verzakking van de onderkaak. Bovendien ontstaat er een naar voren

- ♦ **staande bovenkaak.**


Afgezien van een verstoorde, esthetische indruk hebben deze verkeerde ontwikkelingen ook functionele gevolgen en gevolgen voor de gezondheid: uw kind kan niet goed bijten en kauwen; er ontstaan slik- en spraakgebreken – hij "slist" – en ademt door de mond in plaats van door de neus, wat onder andere tot frequente verkoudheden leidt.



## MUPPY® de correctiehulp\*

### Een slimme vervanging voor schadelijke duimvoorwerpen

- ♦ helpt bij het afleren van alle schadelijke duimgewoontes
- ♦ verhelpt verkeerd functioneren van de tong
- ♦ versterkt de lipspieren
- ♦ leidt tot normaal sluiten van de lippen
- ♦ maakt een einde aan het schadelijke ademen door de mond
- ♦ helpt bij het verhelpen van spraakgebreken (slissen)
- ♦ bevordert de natuurlijke genezing van reeds ontstane anomalieën
- ♦ herstelt de bijtfunctie bij een open beet.

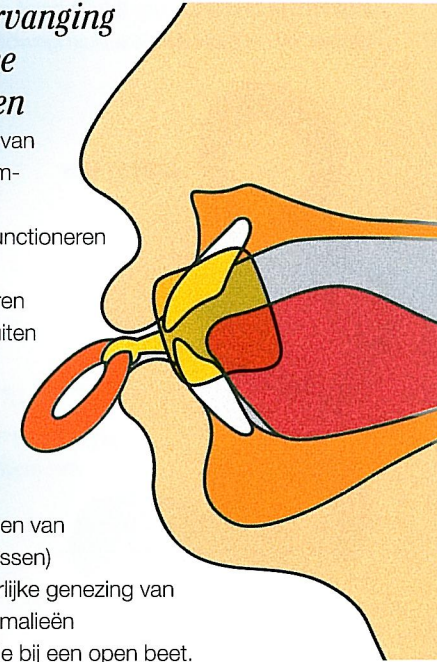

### U bent aan de beurt om te toveren!

Op de leeftijd van ongeveer 3 jaar mag de kalmeringspeen overigens al in het "toverland" verdwijnen en vanaf het 4e levensjaar horen ook duimen en dergelijke niet meer in de mond rond te wandelen, maar dienen zij het "toverland" te bezoeken en als MUPPY® terug te komen!